

- DK:** Brugsanvisning for **bade-/toiletstol M2 Flexi-Tip.**
Beregnet til brug ved badning/brusning og toiletbesøg
- EN:** User guide for **shower/commode chair M2 Flexi-Tip.**
Intended for use at bathing/showering and toilet visit
- DE:** Gebrauchsanweisung für **dusch-/toilettenstuhl M2 Flexi-Tip.**
Stuhl für Dusch/Toiletten Gebrauch
- SV:** Bruksanvisning för **dusch-/toalettstol M2 Flexi-Tip.**
Avsedd att användas vid bad/ dusch och toalettbesök
- NO:** Brukarveiledning for **dusj-/toalettstol M2 Flexi-Tip.**
Designet for bruk når badning/ dusjing og toalettbesøk
- FI:** Käyttöohje **suihku-/wc-tuoli M2- Flexi-Tip.**
Suunniteltu käytettäväksi kylpy-, suihku- ja wc-tuolina.
- NL:** Aanwijzingen voor **douche/toiletstoel M2 Flexi-Tip.**
Ontworpen voor gebruik bij het baden/douchen en toiletbezoek
- IT:** Manuale d'uso per sedia da **doccia/comoda M2 Flexi-Tip allevato.**
Destinato all'uso durante il bagno/la doccia e la visita alla toilette



DK: VIGTIGT!

- VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN.
- VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.
- NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET, KOMMER DER EN BIP-LYD FRA KONTROLBOKSEN VED BRUG.
- NÅR DER KOMMER EN BIP-LYD, SKAL MAN OPLADE BATTERIET, DA BATTERIET KAN TAGE SKADE VED FULDSTÆNDIG AFLADNING.
- HVIS BATTERIET ER AFLADET, KAN MAN IKKE KØRE MOTOREN VED AT SÆTTE OPLADEREN I STOL OG STIKKONTAKT. EN FULD OPLADNING TAGER TYPISK CA. 8 TIMER
- HVIS DIODEN PÅ LADEREN LYSER GRØNT, NÅR DEN TILSLUTTES, ER DER DEFECT PÅ BATTERIET/ SIKRINGEN , SOM SÅ SKAL SKIFTES.
- OPLAD IKKE STOLEN, MENS DEN BEFINDER SIG I OMRÅDER MED VAND.
- BRUG IKKE DE ELEKTRISKE FUNKTIONER PÅ STOLEN, MEDENS DER SPRØJTES VAND PÅ.

EN: IMPORTANT!

- WHEN CHARGING, DO NOT TURN ON THE SWITCH BEFORE THE CHARGER IS CONNECTED TO THE CHAIR.
- THE BATTERY SHOULD BE CHARGED 24 HOURS THE FIRST TIME.
- WHEN THE BATTERY HAS RUN DOWN THERE IS A BEEP SOUND FROM THE CONTROL BOX WHEN THE ELECTRICAL PARTS ARE IN USE.
- WHEN THE BEEP SOUND COMES, YOU HAVE TO RECHARGE THE BATTERY AS IT CAN BE DAMAGED IF YOU LET IT RUN 100 % OUT OF POWER.
- IF THE BATTERY HAS RUN OUT OF POWER, YOU CANNOT USE THE ENGINE BY PUTTING THE CHARGER IN THE WALL PLUG AND THE CHAIR. A FULL RECHARGE TAKES TYPICALLY 8 HOURS.
- IF THE LIGHTBOLT ON THE CHARGER LIGHTS GREEN WHEN CONNECTED, IT IS DUE TO A MALFUNCTION OF THE BATTERY, AND THEREFORE IT NEEDS TO BE CHANGED.
- DO NOT CHARGE THE CHAIR WHILE BEING USED IN AREAS WITH WATER.
- DO NOT USE THE ELECTRICALL FUNCTIONS ON THE CHAIR WHILE SPRAYING WITH WATER.

DE: WICHTIG!

- BEIM AUFLADEN, DEN STROM ERST DANN EINSCHALTEN WENN DIE AUFLADEEINHEIT IN DEN STUHL EINGESETZT IST.
- BEI ERSTER AUFLADUNG MUSS DIE BATTERIE 24 STUNDEN AUFGELADEN WERDEN.
- WENN DIE BATTERIE AM LEERLAUFEN IST, ERLAUTET VOM STEUERKASTEN EIN SIGNALTON, WENN DIE ELEKTRISCHEN TEILE IM GEBRAUCH SIND.
- WENN DAS WARNSIGNAL ERTÖNT MUSS DIE BATTERIE AUFGELADEN WERDEN, DA DIESE BEI VOLLSTÄNDIGER ENTLADUNG BESCHÄDIGT WERDEN KANN. WENN DIE BATTERIE 100 % ENTLADEN WIR, KANN SIE BESCHÄDIGT WERDEN.
- DIE ELEKTRISCHEN TEILE KÖNNEN NICHT WÄHREND DES AUFLADENS IN GEBRAUCH GENOMMEN WERDEN. SIE KÖNNEN ALSO NICHT BEI EINER TOTALEN ENTLADUNG DEN STUHL DURCH EINSTECKEN DES NETZTEILS WEITERBENUTZEN.
- WENN DIE BATTERIE ENTLADEN IST KANN DER STUHL NICHT INBETRIEB GENOMMEN WERDEN, INDEM DER STUHL AN DEN NETZSTECKER ANGESCHLOSSEN WIRD. AUFLADEN DER BATTERIE DAUERT IM NORMALFALL UMGEFÄHR 8 STUNDEN.
- FALLS DER STUHL ENTLADEN IST, DAS LADEGERÄT ANGESCHLOSSEN, UND DIE DIODE DES LADEGERÄTS TROTZDEM GRÜN LEUCHTET IST DIE BATTERIE/SICHERUNG DEFEKT.
- DER STUHL DARF AUS SICHERHEITSGRÜNDEN NICHT IN NASSEN RÄUMEN GELADEN WERDEN.
- DIE ELEKTRISCHEN FUNKTIONEN NICHT WÄHREND AUFENTHALT IN NASSEN UMGEBUNGEN BENUTZEN.

SV: VIKTIGT!

- VID UPPLADDNING, FÅR LADDARAN INTE SÄTTAS I VÄGGEN FÖRRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN.
- VID FÖRSTA UPPLADDNING SKALL BATTERIET LADDAS I 24 TIMMAR.
- NÄR BATTERIET HÅLLER PÅ ATT BLI URLADDAT HÖRS DET ETT BIP-LJUD FRÅN KONTROLLÅDAN UNDER ANVÄNDNING.
- NÄR DU HÖR ETT PIP, MÅSTE DU LADDA BATTERIET. BATTERIET KAN SKADAS OM DET LADDAS UR HELT
- OM BATTERIET ÄR URLADDAT KAN MAN INTE KÖRA MOTORN GENOM ATT SÄTTA I LADDAREN I STOLEN OCH VÄGGKONTAKTEN.
- OM LYSDIODEN PÅ LADDAREN LYSER GRÖNT NÄR DEN ANSLUTS, ÄR BATTERIET ELLER SÄKRING DEFFEKT OCH MÅSTE BYTAS UT.
- EN FULL LADDNING TAR VANLIGTVIS CA 8 TIMMAR
- LADDA INTE STOLEN, MEDAN DEN BEFINNER SIG I OMRÅDEN MED VATTEN.
- ANVÄND INTE ELEKTRISKA FUNKTIONER PÅ STOLEN MEDAN MAN SPRUTAR VATTEN PÅ DEN.

NO: VIKTIG !

- NÅR STOLEN SKAL LADES, SETTES LADEKONTATEN I STOLEN FØR STØPSELET SETTES I STIKKONTAKTEN.
 - NÅR BATTERIET LADES FOR FØRSTE GANG BØR DET LADES I 24 TIMER.
 - LAD STOLEN ETTER BRUK.
 - NÅR DET KOMMER EN PIPE-LYD SKAL MAN LADE BATTERIET. BATTERIET KAN SKADES VED FULLSTENDIG UTLADING.
 - HVIS BATTERIET ER UTLADET KAN MAN IKKE KJØRE MOTOREN VED Å SETTE LADEREN I STOL OG STIKKONTAKT. EN FULL OPPLADING TAR CA. 8 TIMER.
 - HVIS DIODEN PÅ LADEREN LYSER GRØNT NÅR DEN TILKOBLES, ER DET NOE GALT MED BATTERIET ELLER SIKRINGEN, SOM SÅ SKAL SKIFTES.
 - LAD IKKE STOLEN MENS DEN BEFINNER SEG I OMRÅDER MED VANN.
 - BRUK IKKE ELEKTRISKE FUNKSJONER PÅ STOLEN NÅR DEN SPYLES MED VANN.
-

FI: TÄRKEÄÄ!




- KUN LATAAT FLEXI-TIP TUOLIA, ÄLÄ KÄÄNNÄ KATKAISIJAA ENNEN KUIN LATURI ON KYTKETTY KIINNI TUOLIIN.
- AKKUA ON LADATTAVA 24 TUNTIA ENNEN FLEXI-TIP TUOLIN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ.
- KUN AKUN VARAUS ON ALHAINEN, KUULUU PIIP-ÄÄNI OHJAINYKSIKÖSTÄ KÄYTETTÄESSÄ TUOLIN SÄÄTÖJÄ.
- KUN KUULET PIIP-ÄÄNEN TUOLI TULEE LADATA. JOS AKUN VARAUS ANNETAAN MENNÄ TÄYSIN TYHJÄKSI (100%) SE VOI VIOITTUA/HAJOTA.
- JOS AKUN VARAUS ON TYHJÄ, TUOLIA EI VOI KÄYTTÄÄ LATAAMALLA SITÄ SAMANAIKaisesti. 100% AKUN TÄYTEEN LATAUS KESTÄÄ TYYPILLISESTI 8 TUNTIA.
- JOS LATURIN MERKKIVALO PALAA VIHREÄNÄ LATURIA KYTKETTÄESSÄ, ON SE MERKKI AKUN/ SULAKKEEN TOIMINTAHÄIRIÖSTÄ JA AKKU/ SULAKE ON VAIHDETTAVA UUTEEN.
- ÄLÄ LATAA TUOLIA KOSTEISSA TILOISSA.
- ÄLÄ KÄYTÄ TUOLIN SÄHKÖTOIMINTOJA SAMANAIKaisesti SUIHKUTTAESSA VETTÄ. TEE ISTUIN-/ SELKÄOSANKULMAN SÄÄTÖ PESUTILANTEEN VÄLILLÄ.

NL: BELANGRIJK!

- DOOR LADEN; SCHAKEL DE AANGESLOTEN VOORDAT DE OPLADER POWER IS SAT GESTOLEN.
- DE EERSTE LADING OM DE BATTERIJ 24 UUR.
- WANNEER DE BATTERIJ BEGINT TE WORDEN AFGEVOERD, ER TE KRIJGEN EEN BIP GELUID UIT DE CONTROL BOX GEBRUIK.
- WANNEER EEN BIP GELUID, HET CHARGE BATTERIJ WANNEER DE BATTERIJ MOGELIJK OP DOOR BESCHADIGDE HELEMAAL LEEG.
- ALS DE BATTERIJ LEEG IS, KUN JE NIET LAAT DE MOTOR DE LADER VERTROUWEN EN OUTLET. EEN VOLLEDIGE OPLAADBEURT DUURT TYPISCH CA. 8 UUR.
- IF LED AAN CHARGER LAMPJE GROEN WANNEER DEZE IS AANGESLOTEN, IS DEFECTE ACCU / FUSE TEGEN DIE TIJD OM TE VERANDEREN.
- KOSTENPERCENTAGE NIET GESTOLEN TIJDENS HET IS IN GEBIEDEN MET WATER.
- GEBRUIK DE ELEKTRISCHE WERKZAAMHEDEN OVER GESTOLEN, TERWIJL HET WATER WORDT BESPAT OP.


IT: IMPORTANTE!

- DURANTE LA CARICA, NON ACCENDERE L'INTERRUTTORE PRIMA DI COLLEGARE IL CARICABATTERIE ALLA SEDIA.
- LA BATTERIA DEVE ESSERE CARICATA 24 ORE LA PRIMA VOLTA.
- QUANDO LA BATTERIA È SCARICATA, DALLA SCATOLA DI CONTROLLO VIENE UN BIP SEGNALE QUANDO LE PARTI ELETTRICHE SONO IN USO.
- QUANDO ARRIVA IL BIP, È NECESSARIO RICARICARE LA BATTERIA IN QUANDO SI PUÒ DANNEGGIARE SE LA LASCIATE SCARICA AL 100%.
- SE LA BATTERIA È SCARICA, NON È POSSIBILE UTILIZZARE IL MOTORE PONENDO LA CARICATORE NELLA SPINA A MURO E NELLA SEDIA. UNA RICARICA COMPLETA RICHIEDE TIPICAMENTE 8 ORE.
- SE LA LUCE SUL CARICABATTERIE SI ACCENDE IN VERDE QUANDO COLLEGATO, È DOVUTO A MALFUNZIONAMENTO DELLA BATTERIA E QUINDI DEVE ESSERE SOSTITUITA.
- NON CARICARE LA SEDIA MENTRE VIENE UTILIZZATA IN AREE CON ACQUA.
- NON UTILIZZARE LE FUNZIONI ELETTRICHE SULLA POLTRONA MENTRE SI SPRUZZA CON ACQUA.

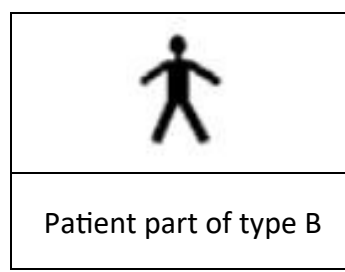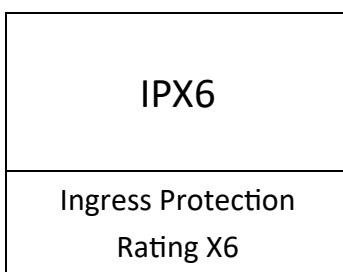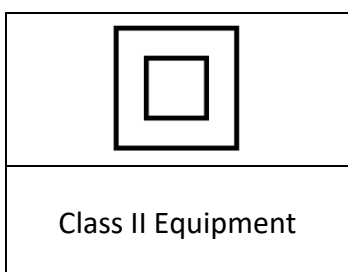


- DK:** Forventet levetid: 10 år. Gælder ikke batterier. **NO:** Forventet levetid: 10 år. Ikke aktuelt for batterier.
- EN:** Life expectancy: 10 years. Not applicable to batteries. **FI:** Elinaika: 10 vuotta. Ei koske paristoja. Katso
- DE:** Lebenserwartung: 10 Jahre. Gilt nicht für Batterien. **NL:** Levensverwachting: 10 jaar. Niet van toepassing op batterijen.
- SV:** Förväntad livslängd: 10 år. Ej tillämbart på batterier. **IT:** Aspettativa di vita: 10 anni. Non applicabile alle batterie.

Voltage and current information i.e. 100-240
Vac 50-60 Hz 400 mA/ Out: 24Vdc, 250 VA


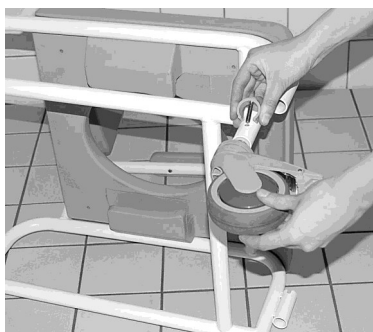


- DK:** Ved montering af hjul føres teleskopbenene op i rørene og clipsene monteres i passende og ensartet højde.
- EN:** When mounting the wheels, the telescopic legs is placed in the pipes and the clips is mounted in suitable and uniform height.
- DE:** Wenn der Montage des Rades sein Teleskopbeine in den Rohren und die in geeigneten und gleichmäßige Höhe montiert Clips.

- SV:** Vid montering av hjulet, vara teleskop benen upp i rören och klippen monterade i lämplig och likformig höjd.
- NO:** Når du installerer rattet, være teleskopiske ben opp i rør og klippene monterert i passende og jevn høyde.
- FI:** Pyörien asennus tapahtuu asettamalla pyörän teleskooppijalka rungon putken sisään ja kiinnittämällä se klipsillä haluttuun korkeu teen. Säädä kaikki pyörät samalle korkeudelle.
- NL:** Bij het installeren van het wiel, zijn uitschuifbare benen omhoog in de leidingen en de clips gemonteerd in geschikte en uniforme hoogte.
- IT:** Durante il montaggio delle ruote, le gambe telescopiche vengono posizionate nei tubi e le clip vengono montate a un'altezza uniforme e adatta.

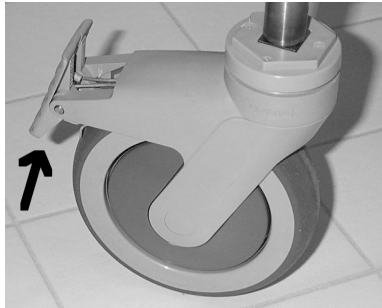

- DK:** Lås alle fire hjul ved badning/brusning. Det forreste højre hjul (mørkegrå) kan låses i køreretningen, så kraften ved igangsættelse og kørsel mindskes.
- EN:** Lock all four wheels when bathing/showering. The front right wheel (dark gray) can be directional locked to easy while driving til chair.
- DE:** Verriegeln Sie alle vier Räder beim Baden / Duschen. Das vordere rechte Rad (dunkelgrau) in Richtung der Kraft verriegelt werden durch die Initiierung und Fahren reduziert.
- SV:** Låsa alla fyra hjulen när bad / dusch. Höger framhjul (mörkgrå) kan låsas i riktning mot nämnda kraft genom att initiera och körning minskas.
- NO:** Lås alle fire hjulene når badning / dusjing. Den fremre høyre hjul (mørk grå) kan låses i retning av at kraft ved å initiere og kjøring redusert.
- FI:** Lukitse kaikki 4 pyörää kylvettäessä / suihkussa. Oikea etupyörä (tummanharmaa lukko) on suuntalukituspyörä, joka helpottaa tuolin työntämistä suoraan.
- NL:** Lock alle vier de wielen bij het baden / douchen. Het rechter voorwiel (donkergrijs) kan worden vergrendeld in de richting van de kracht door het initiëren en rijden verminderd.
- IT:** Bloccare tutte e quattro le ruote durante il bagno/la doccia. La ruota anteriore destra (grigio scuro) può essere bloccata direzionalmente per facilitare la guida fino alla sedia a rotelle.

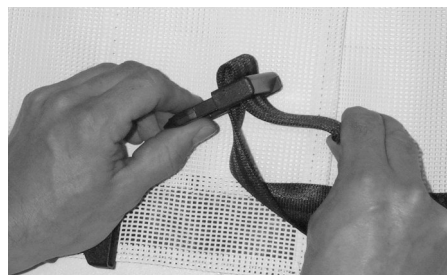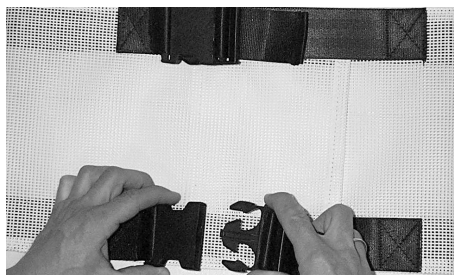

DK: Justering af ryg (se billeder). Vigtigt! Ryg vaskes max. ved 80 grader.

EN: Adjusting the back (see photos). Important! Back wash max. at 80 degrees.

DE: Einstellen der Rückseite (siehe Fotos). Wichtig! Zurück Wäsche max. bei 80 Grad.


SV: Justera ryggen (se bilder). Viktigt! Tillbaka tvätt max. på 80 grader.

NO: Justering av ryggen (se bilder). Viktig! Tilbake vask maks. på 80 grader.

FI: Selkäosan säätö (katso kuvat). TÄRKEÄÄ! Selkäosan pesu MAX. 80°C.

NL: Aanpassen van de rug (zie foto's). Belangrijk! Terug wassen max. bij 80 graden.

IT: Regolazione dello schienale (vedi foto). Importante! Lavare a max 80 gradi.

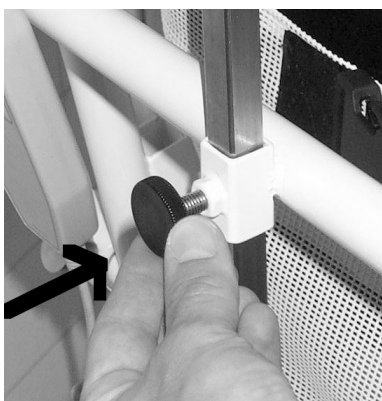

DK: Nakkestøtten justeres i højden ved at løsne og stramme skruen ved rette position.

EN: The headrest is adjustable in height by loosening and tightening the screw at the right position.

DE: Die Kopfstütze höhenverstellbar ist durch Lösen der Schraube und an der richtigen Position festziehen.


SV: Huvudstödet är justerbart i höjd genom att lossa och dra åt skruven i rätt position.

NO: Hodestøtten er justerbar i høyden ved å løsne og stramme skruen på riktig posisjon.

FI: Päätuken korkeus säädetään avaamalla/kiristämällä lukitusruuvi, säädä päätuken haluttu korkeus.

NL: De hoofdsteun is in hoogte verstelbaar door het losdraaien en vastdraaien van de schroef op de juiste positie.

IT: Il poggiatesta è regolabile in altezza allentando e stringendo la vite nella posizione desiderata.

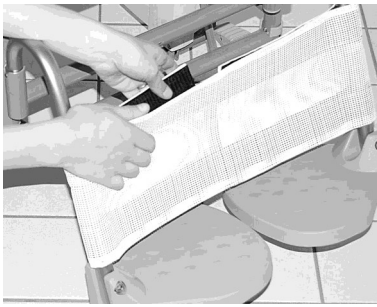

DK: Lægstøtten fastgøres og justeres ved velcrobånd på bagsiden. Vigtigt! Lægstøtten vaskes ved max. 80 grader.

EN: The calf support is secured and adjusted by the Velcro strip on the back. Important! Calf support washed at max. 80 degrees.

DE: Die Wadenstütze wird durch das Klettband auf der Rückseite befestigt und angepasst. Wichtig! Die Wadenstütze bei max. 80 Grad.

SV: Vadstödet säkras och justeras med kardborrebandet på baksidan. Viktigt! Vadstödet tvättas vid max. 80 grader.

NO: Leggstøtten er festet og justert av borrelåsen på baksiden. Viktig! Må vaskes på maks. 80 grader.

FI: Pohjetuessa on tarranauha kiinnitys, säädä pohjetuki haluttuun kireyteen tarranauhan avulla. TÄRKEÄÄ! Pohjetuen pesu max. 80°C.

NL: Het kalf ondersteuning is beveiligd en aangepast door de klittenband op de rug. Belangrijk! Kalf ondersteuning gewassen op max. 80 graden.

IT: Il supporto per polpacci è fissato e regolato dalla striscia in velcro sul retro. Importante! Supporto per polpacci lavato a max. 80 gradi.



DK: Ved montering af armlæn hives snaplåsen op, hvorefter armlæn trækkes op og skubbes ud til siden.

EN: When mounting the armrest the snap lock is lifted, then the armrest pulled up and pushed to the side.

DE: Wenn die Armllehne Montage Nesselsucht Schnappverschluss, Armllehne nach oben gezogen dann und schob zur Seite.


SV: Vid montering armstöds bikupor snäpplåset, då armstöd dras upp och skjuts åt sidan.

NO: Ved montering av armlenet elveblest snap låse opp etter armene trukket opp og skjøvet til side.


FI: Käsinojan asentaminen / poistaminen: Vapauta lukitusvipu nostamalla, aseta / käännä käsinoja 45° kulmaan ja vedä sivulle. Käsinoja lukittuu ala-asennossa vaakatasoon.

NL: Bij de montage van de armsteun bijenkorven snap lock, dan armleuning omhoog getrokken en geduwd naar de kant.

IT: Durante il montaggio del bracciolo, il blocco a scatto viene sollevato, quindi il bracciolo viene tirato verso l'alto e spinto di lato.

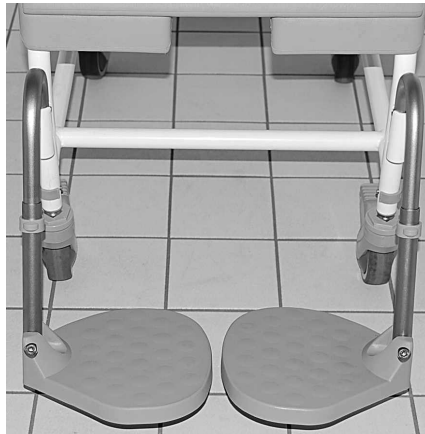


- DK:** Højden på fodstøtter justeres ved hjælp af clips. For at give ekstra plads, kan fodstøtterne skubbes til side ved at løfte og dreje, mens fodpladerne kan vippe.
- EN:** The height of the footrest is adjusted by means of clips. For extra space, footrests can be pushed aside by lifting and turning, while the footrests can be tilted.
- DE:** Die Höhe der Fußstütze ist mittels Klammern eingestellt. Für zusätzlichen Platz, schob Fußstützen beiseite durch Anheben und Drehen, während die Fußstützen gekippt werden kann.
- SV:** Höjden på fotstödet justeras med hjälp av clips. För extra utrymme, fotstöd trängs undan genom att lyfta och vrida, medan fotstöden kan lutas.
- NO:** Høyden av fotstøtten blir justert ved hjelp av klips. For ekstra plass, fotstøtter skjøvet til side ved å løfte og slå, mens fotplatene kan vippe.
- FI:** Jalkatuen korkeus säädetään haluttuun korkeuteen klipsikiinnityksellä. Jalkatuet ovat sivulle käännettävät ja poisnostettavat. Jalkalevy voidaan kääntää ylös.
- NL:** De hoogte van de voetsteun wordt ingesteld door middel van klemmen. Voor extra ruimte, voetsteunen opzij geduwd door het optillen en draaien, terwijl de voetsteunen kan worden gekanteld.
- IT:** L'altezza del poggiapiedi è regolabile tramite clip. Per ottenere maggiore spazio, è possibile spostare i poggiapiedi sollevandoli e ruotandoli, mentre è possibile inclinarli.

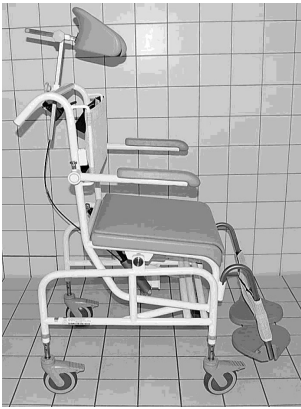


- DK:** Vær opmærksom på at bruger kan falde forover ved negativ tip position!
- EN:** Be aware that the user can fall forward in negative tip position!
- DE:** Seien Sie sich bewusst, dass der Benutzer nach vorne durch negative Spitzenposition fallen kann!
- SV:** Nar medveten om att brukaren kan falla fremåt när stolen är tiltet framåt (Negativ tilt)
- NO:** Vær oppmerksom på at brukeren kan falle fremover ved negative spissposisjon !

- FI:** Huomaa, että käyttäjä voi pudota eteenpäin negatiivinen kärjen asema!
- NL:** Wees ervan bewust dat de gebruiker naar voren kan vallen door negatieve tip positie!
- IT:** Tenere presente che l'utente può cadere in avanti nella posizione di punta negativa!

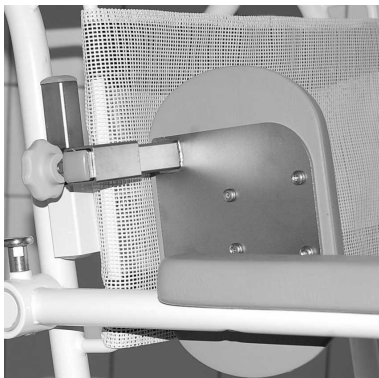

- DK:** Sidestøtterne klikkes ned i de firkantede rør på stellet. Ved justering i dybden løsnes fingerskruen og strammes igen ved rette position.
- EN:** The side supports is clicked down into the square pipes of the frame. By adjusting the depth loosen the thumb screw and tighten again at the right position.
- DE:** Die Seitenstützen in die quadratischen Rohre des Rahmens geklickt wird. Durch die Einstellung lösen die Tiefe, um die Daumenschraube und ziehen wieder an der richtigen Stelle.
- SV:** Sidostöden klickas ned i de fyrkantiga rören i ramen. Genom justering av djupet lossa skruv och dra åt igen vid rätt position.
- NO:** Sidestøttene klikkes ned i de firkantede rørene av rammen. Ved å justere dybden løsne vingeskruen og skru igjen til rett stilling.
- FI:** Vartalotukien asennus: Asenna vartalotuet neliön mallisiin runkokiinnikkeisiin. Syvyysäättö tapah tuu sormiruuveja löysäämällä ja kiristämällä.
- NL:** De zijsteunen geklikt beneden in de vierkante buizen van het frame. Door het aanpassen van de diepte draai de duimschroef en weer vast op de juiste plaats.
- IT:** I supporti laterali vengono inseriti nei tubi quadrati del telaio. Regolando la profondità, allentare la vite a testa zigrinata e serrarla nuovamente nella posizione corretta.

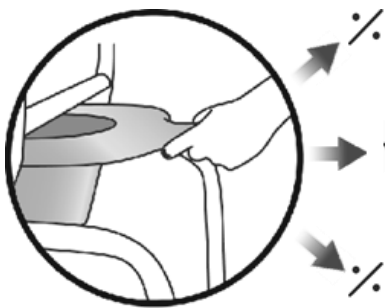

- DK:** Spand trækkes ud på bagsiden af sædet i lige bevægelse.
- EN:** Bucket is pulled out on the back of the seat in a steady motion.
- DE:** Eimer gezogen auf der Rückseite des Sitzes in die richtige Bewegung.
- SV:** Bäckenet dra ut från baksidan av sätet i en rak rörelse.
- NO:** Bekkenet trekkes ut på baksiden av setet i den riktige bevegelse.
- FI:** Alusastia poistetaan / asetetaan paikoilleen vetämällä / työntämällä tasai sesti.
- NL:** Emmer trok aan de achterkant van het zadel in de juiste beweging.
- IT:** Il secchio viene estratto dallo schienale del sedile con un vimento costante.



- DK:** Undgå at sidde på de yderste 10 cm af sædet, da stolen kan tippe fremover.
- EN:** Avoid sitting on the last 10 cm of the seat, as the chair may tip forward.
- DE:** Vermeiden Sie auf den letzten 10 cm des Sitzes sitzen, wie der Stuhl nach vorne kippen kann.
- SV:** Sitt inte på de främra 10 cm. Tip risk!

NO: Unngå å sitte på de siste 10 cm av setet, som stolen kan tippe forover.

FI: Vältä istuutumista / istumista etureunalle / etureunalla 10cm, koska tuoli voi kipata eteenpäin!

NL: Vermijd zitten op de laatste 10 cm van de stoel, als de stoel naar voren kan kantelen.

IT: Evitare di sedersi sugli ultimi 10 cm del sedile, poiché potrebbe farlo la sedia punta in avanti.



- DK:** Stå ikke på fodstøtterne.
- EN:** Do not stand on the footrests.
- DE:** Stellen Sie sich nicht auf den Fußrasten.
- SV:** Stå inte på benstöden/fotplattarna.
- NO:** Ikke stå på fotplatene.
- FI:** Älä seiso jalkatukien päällä, koska tuoli voi kipata eteenpäin!
- NL:** Sta niet op de voetsteunen.
- IT:** Non salire sui poggiapiedi.



DK: De to øverste knapper justerer vinklen mellem ryg og sæde. De to nederste knapper bruges til at ændre sædevinklen. Såfremt brugeren ikke selv er i stand til at holde fast i armlænene, skal hjælperen lægge brugerens hænder i skødet før stolen tippes

EN: The top two buttons adjusts the angle between the back and seat. The two lower buttons are used to change the seat angle. If the user is not able to hold on to the armrests, the helper must put the user's hands in his lap before the chair tipped

DE: Die beiden oberen Tasten stellt den Winkel zwischen der Lehne und Sitzfläche. Die beiden unteren Tasten werden verwendet, um den Sitzwinkel zu ändern. Wenn der Benutzer die Armlehnen nicht festhalten kann, muss der Helfer die Hände des Benutzers in seinen Schoß legen, bevor der Stuhl kippt


SV: De översta två knapparna för att justera vinkeln mellan ryggen och sitsen. De två nedersta knapparna används för att ändra sittvinkeln. Om användaren inte kan hålla fast i armstöden måste hjälpen sätta användarens händer i knäet innan stolen vipps

NO: De to øverste knappene justeres vinkelen mellom rygg og sete. De to nederste knappene brukes til å endre setevinkelen. Hvis brukeren ikke klarer å holde fast i armlenene, må hjelperen legge brukers hender i fanget før stolen tippet

FI: Käsihjaimen kaksi ylintä nappia säätävät selkäosan kulmaa. Kaksi alempaa nappia säätävät istuin kulmaa. Jos tuolissa istuva henkilö ei kykene pitämään kiinni käsinojista, on avustajan asetettava tuolissa istuvan henkilön kädet istujan syliin ennen istuinkulman säätöä.

NL: De bovenste twee knoppen past de hoek tussen de rugleuning en zitting. De twee onderste knoppen worden gebruikt om de zithoek te veranderen. Als de gebruiker de arMLEUNINGEN niet kan vasthouden, moet de helper de handen van de gebruiker op zijn schoot leggen voordat de stoel kantelt

IT: I due pulsanti superiori regolano l'angolazione tra schienale e seduta. I due pulsanti inferiori servono per modificare l'angolazione della seduta. Se l'utente non riesce a reggersi ai braccioli, l'assistente deve appoggiare le mani dell'utente in grembo prima che la sedia si ribalti.

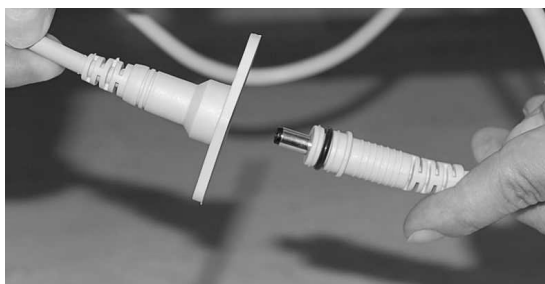


DK: Ved opladning af batteri tages strømstikket ud af stik til batteriboks og isættes opladerstikket.

EN: When charging the battery remove the power plug from the battery box and insert the charger plug.

DE: Beim Laden der Batterie Netzstecker aus der Wand zu dem Batteriekasten und den Ladestecker einsetzen.

SV: När du laddar batteriet ta stickkontakten ur vägg till batterilådan och sätt i laddaren.

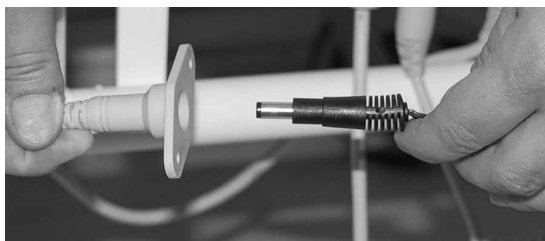


NO: Når batteriet lades ut støpselet fra veggen til batteriboksen og koble laderpluggen .

FI: Akkua ladattaessa irrota virtajohto akkurasian liittimestä ja liitä laturin johto akkurasian liittimeen.

NL: Bij het opladen van de batterij stekker uit de muur om de accubak en steek de stekker van de oplader.

IT: Durante la ricarica della batteria, rimuovere la spina di alimentazione dal vano batteria e inserire la spina del caricabatterie.

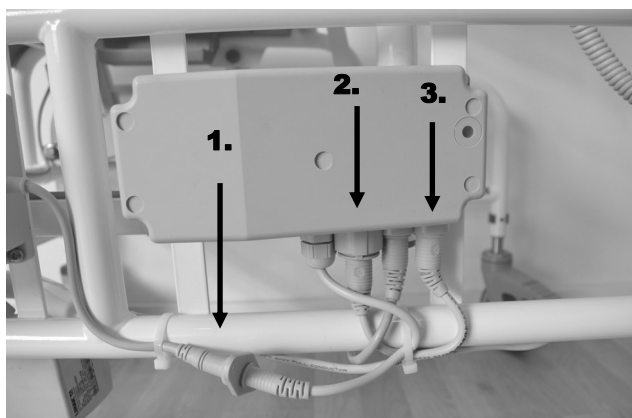

DK: 1. Stik til batteriboks 2. Kabel til ryg aktuator
3. Kabel til sæde aktuator

EN: 1. Insert to battery box 2. Cable to back actuator
3. Cable for seat actuator

DE: 1. Legen Sie die Batteriekasten 2. Kabel an Aktor
3. Kabel für Sitz Aktor zurück

SV: 1. Sätt batterilådan 2. Kabel att backa ställdon
3. Kabel för sätes ställdon

NO: 1. Sett batteriboksen 2. Kabel for å sikkerhets aktuator 3. Kabel for sete aktuator

FI: 1. Akkurasian liitin 2. Käsihjaimen johto 3. Moottorin johto

NL: 1. Plaats de accubak 2. Kabel om een back-actuator 3. Kabel voor zitting actuator



DK: Stolen modtages fuldt opladet. En fuld opladning tager ca. 8 timer. Når batteriet er ved at være afladet kommer der en bip-lyd. Når batteriet lades lyser dioden på opladeren orange. Når batteriet er ladet lyser dioden på opladeren grønt. Bemærk: hvis dioden på opladeren lyser grønt, når den tilsluttes, er der en defekt på batteriet og det skal skiftes

- EN:** The chair is received fully charged. A full charge takes about 8 hours. When the battery is running low it goes beep. When the battery is charging the LED on the charger is orange. When the battery is charged the LED on the charger is green. Note: If the light on the charger lights up green when connected, there is a defect in the battery and it must be changed.
- DE:** Der Stuhl erhielt voll aufgeladen ist. Eine vollständige Ladung dauert ca. 8 Stunden. Wenn die Batterie fast leer ist kommt ein Piepston. Wenn die Batterie auf das Ladegerät die LED aufgeladen ist orange. Wenn die Batterie die LED auf dem Ladegerät aufgeladen ist grün. Hinweis: Wenn das Licht auf dem Ladegerät leuchtet grün, wenn angeschlossen, gibt es einen Fehler in der Batterie und es muss geändert werden.
- SV:** Stolen fick fulladdat. En full laddning tar ungefär 8 timmar. När batteriet börjar ta slut kommer ett pipande ljud. När batteriet laddas LED på laddaren är orange. När batteriet är laddat lysdioden på laddaren lyser grönt. Obs: Om lampan på laddaren lyser grönt när den är ansluten, det finns ett fel i batteriet och det måste bytas ut.
- NO:** Stolen mottatt fulladet. En full opplading tar ca 8 timer. Når batteriet er lavt kommer en pipelyd. Når batteriet lades LED på laderen er oransje. Når batteriet er ladet LED på laderen er grønn. Merk: Hvis lampen på laderen lyser grønt når den er tilkoblet, er det en feil i batteriet, og det må endres.
- FI:** Tuoli sai täyteen. Täysi lataus kestää noin 8 tuntia. Kun akku on vähissä tulee äänimerkki. Kun akku latautuu merkkivalo on laturi on oranssi. Kun akku on ladattu LED latauslaitteeseen on vihreä. Huomautus: Jos valo laturin palaa vihreänä, kun yhteys on vika akku ja se on vaihdettava.
- NL:** De stoel ontvangen volledig opgeladen. Een volledige lading duurt ongeveer 8 uur. Wanneer de batterij bijna leeg is komt er een piepend geluid. Wanneer de batterij wordt opgeladen de LED op de oplader is oranje. Wanneer de batterij van de LED wordt gebracht op de lader is groen. Opmerking: Als het lampje op de oplader groen oplicht wanneer deze is aangesloten, is er een defect in de accu en het moet worden veranderd.
- IT:** La sedia viene consegnata completamente carica. Una ricarica completa richiede circa 8 ore. Quando la batteria è in esaurimento viene emesso un segnale acustico. Quando la batteria è in carica, il LED sul caricabatterie è arancione. Quando la batteria è carica il LED sul caricabatterie è verde. Nota: se la luce sul caricabatterie si illumina di verde quando è collegato, la batteria è difettosa e deve essere sostituita.

DK: Artikel nr. 310217

Sæde m/nøglehulsudskæring
Max. Belastning 125 kg

EN: Art no. 310217

Horseshoe seat
Max. load 125 kg

DE: Artikel nr. 310217

Intim sitz
Max. Benutzergewicht 125 kg

SV: Artikkel no. 310217

Sits m/nyckelhålsform
Max. belastning 125 kg

NO: Artikkel no. 310217

Intim sete
Max. laste 125 kg

FI: Tuote. 310217

Intiimi saippua
Max. kuorma 125 kg

NL: Artikel-nr. 310217

Intieme zeep
Max. laden 125 kg

IT: Art. n. 310217

Sedile a ferro di cavallo
Carico massimo 125 kg

DK: Artikel nr. 310216

Sæde m/ovalt hul, lukket front
Max. Belastning 125 kg

EN: Art no. 310216

Standard seat
Max. load 125 kg

DE: Artikel nr. 310216

Standardsitz
Max. Benutzergewicht 125 kg

SV: Artikkel no. 310216

Standard sits
Max. belastning 125 kg

NO: Artikel nr. 310216

Standard sete
Max. Belastning 125 kg

FI: Art no. 310216

Vakioistuin
Max. load 125 kg

NL: Artikel nr. 310216

Standaard zitting:
Max. Benutzergewicht 125 kg

IT: Artikkel no. 310216

Sedile standard
Carico massimo 125 kg

DK: Forventet levetid: 10 år

EN: Life expectancy: 10 years

DE: Lebenserwartung: 10 Jahre

SV: Förväntad livslängd: 10 år

NO: Forventet levetid: 10 år

FI: Odotettu käyttöikä: 10 vuotta.

NL: Levensverwachting: 10 jaar.

IT: Aspettativa di vita: 10 anni

- DK:** 2 års reklamationsret mod fabrikationsfejl.
½ års reklamationsret på bly batterier.
- EN:** 2 Years complaint rights against
manufacturing errors. ½ year complaint
rightst on lead batteries.
- DE:** 2 Jare Reklamationsrecht über Fabrikations-
fehler. ½ Jahr Reklamationsrecht auf
Bleibatterien.
- SV:** 2 års reklamationsrätt mot fabrikationsfel
½ års reklamationsrätt på blybatterier.
- NO:** 2 års reklamasjonsrett mot fabrika
sjonsfeil. ½ års reklamasjonsrett på
blybatterier.
- FI:** 2 vuoden takuu koskien valmi stusvir
heitä. ½ vuoden takuu lyijyakuille.
- NL:** 2 jaar klachtrecht op fabricagefouten
½ jaar klachtrecht op loodaccu's.
- IT:** 2 anni di diritto di reclamo contro
errori di fabbricazione. Diritto di
reclamo di ½ anno sulle batterie al
piombo.
-

- DK:** **NB!** Må ikke bruges i klorholdige miljøer som fx svømmehaller
- EN:** **Attention!** Not to be used in chlorine-containing environments as Swimming pools etc.
- DE:** **Achtung!** Nicht in chlorierten Umgebungen wie Schwimmbäder nutzen.
- SV:** **OBS!** Använd inte i klorerade miljöer såsom simbassänger.
- NO:** **NB!** Må ikke brukes i klorerte miljøer som svømmebassenger.
- FI:** **Huom!** Älä käytä kloorattua ympäristöissä, kuten uima-altaat.
- NL:** **NB!** Niet gebruiken in gechloreerde omgevingen zoals zwembaden.
- IT:** **Attenzione!** Da non utilizzare in ambienti contenenti cloro come piscine ecc.

DK: Rengøring

Produktet kan rengøres med almindelige rengøringsmidler uden slibemiddel. Efter rengøringen skal produktet skylles og aftørres. Produktet kan tåle rengøring op til 85° C i 3 minutter.

EN: Cleaning

The product can be cleaned with regular cleaning without non-abrasive detergent. Wash and dry the product after the cleaning. The product can be washed up to 85° degrees in 3 minutes.

DE: Reinigung

Das Produkt kann bei regelmäßiger Reinigung ohne nicht scheuernden Reinigungsmittel gereinigt werden. Waschen und trocknen Sie das Produkt nach der Reinigung. Das Produkt kann bis zu 85 ° Grad 3 Minuten gewaschen werden.

SV: Rengöring

Produkten kann rengöras med vanligt rengöringsmiddel utan slipmedel. Efter rengöringen skal produkten spolas och torkas. Produkten kann motstå rengöring upp till 85° C i 3 minuter.

NO: Rengjøring

Produktet kan rengjøres med vanlig såpe uten slipemiddel. Etter rensing, ble produktet skylt og tørket. Produktet kan tåle rensing opp til 85 ° C i 3 minutter.

FI: Puhdistus

Tuote voidaan puhdistaa yhteinen hankaamattomalla puhdistusaineella. Puhdistuksen jälkeen tuote huuhdellaan ja kuivataan. Tuote kestää puhdistuksen jopa 85 ° C: ssa 3 minuutin ajan.

NL: Schoonmaken

Het product kan worden gereinigd met voorkomende niet-agressief schoonmaakmiddel. Na de reiniging wordt het product gewassen en gedroogd. Het product kan de reiniging weerstaan tot 85 ° C gedurende 3 minuten.

IT: Pulizia

Il prodotto può essere pulito con una normale pulizia senza detersivi abrasivi. Lavare e asciugare il prodotto dopo la pulizia. Il prodotto può essere lavato fino a 85° in 3 minuti.

DK: Stelreklamationsret

Vi yder 5 års reklamationsret imod stelbrud på M2-bade/toiletstole samt rustfri stål badebænke. Reklamationsretten gælder ved fabrikations- eller materialefejl og under forudsætning af normalt brug. Vi gør opmærksom på at almindelig slitage ikke er dækket under reklamationsretten.

EN: Complaint rights for frame

HMN grants 5 years complaint rights against frame break-down for all M2 Shower/commode chairs and stainless steel shower stools. The complaint rights applies for production and material break downs, and can only be used if the products have been in normal use. Please note that the normal wear and tear is not covered under complaint rights.

DE: Reklamationsrecht über Rahmen

HMN bietet 5 Jahre Reklamationsrecht gegen Rahmenbruch für alle M2 Bade-/Toilettenstühle und Duschhocker aus Edelstahl. Das reklamationsrecht deckt Produktionsfehler und Materialfehler, jedoch nur wenn das produkt normal benutzt worden ist. Bitte beachten Sie, das normaler Verschleiss von diesem Recht nicht dedeckt ist.

SV: Reklamationsrätt för ramar

Vi lämnar 5 års reklamationsrätt mot rambrott på M2-bad/toalettstolar samt rostfritt stål duschstolar. Reklamationsrätten gäller vid fabrikations- eller materialfel och under förutsättning av normalt bruk. Vi gör er uppmärksam på att normalt slitage inte täcks av reklamationsrätten.

NO: Reklamasjonsrett for ramme

Vi gir 5 års reklamasjonsrett mot brudd på M2 dusj / toalettstoler og rustfritt stål badbenker. Reklamasjonsretten gjelder produksjons- eller materialfeil, og forutsatt normal bruk. Vær oppmerksom på at normal slitasje dekkes ikke av reklamasjonsretten.

FI: Rajaa valitusoikeus

Myönnämme M2 suihku/WC-tuolin rungolle 5 vuoden takuun koskien materiaali- ja valmistusvirheitä, sen ollessa normaalissa käytössä. Takuu ei koske tuolin osien normaalia kulumista.

NL: Kadreer het klachtrecht

Wij bieden een klachtrecht van 5 jaar tegen breuk op M2 douche / commode stoelen en roestvrij staal baden bankjes. De klachtrecht geldt voor de productie of materiaalfouten en uitgaande van normaal gebruik. Houd er rekening mee dat de normale slijtage niet onder de klachtrecht.

IT: Diritto di reclamo per il telaio.

HMN garantisce 5 anni di diritto di reclamo contro guasti del telaio per tutte le sedie da doccia/comoda M2 e gli sgabelli da doccia in acciaio inossidabile. Il diritto di reclamo si applica ai guasti di produzione e dei materiali e può essere esercitato solo se i prodotti sono stati utilizzati normalmente. Si prega di notare che la normale usura non è coperta dal diritto di reclamo.

M2 Flexi-Tip

Forebyggende Eftersyn:

Gælder for følgende Varenumre: (310216, 310217)

For at sikre at hjælpemidlet fungerer trygt for brugeren anbefaler vi at der kan udføres nedenstående eftersyn.

1. Kontroller at stellet er uden brud og stolen er intakt.
2. Kontroller at hjulene på stolen frit kan køre rundt.
3. Hvis stolen har et retningsfast hjul kontroller at det fungerer som normalt.
4. Kontroller at bremserne på hjulene fungerer.
5. Kontroller at clips til højdejustering af stolens hjul ikke er defekte.
6. Kontroller at sædet er intakt og der ikke er brud på PU skummet.
7. Kontroller at armlænene er korrekt monteret, fungerer og der ikke er brud på PU skummet.
8. Kontroller at ryggen i netvæv er korrekt monteret og intakt.
9. Kontroller at stolens tip funktion fungerer.
10. Kontroller at stolens fæld bare ryg fungerer.
11. Kontroller at opladeren fungerer korrekt (se evt. brugsvejledning)
12. Kontroller at batteriet kan oplades (se evt. brugsvejledning)



M2 Flexi-Tip

Rekonditionerings Instruktion:

Gäller följande Art.nr: (310216, 310217)

För att säkerställa att hjälpmedlet fungerar säkert för brukaren rekommenderar vi följande inspektioner utförs.

1. Kontrollera att ramen är utan brott och stolen är intakt.
2. Kontrollera att hjulen på stolen kan rulla fritt.
3. Om stolen har ett rikttningsbestämt hjul, kontrollera att det fungerar som normalt.
4. Kontrollera att bromsarna på hjulen fungerar.
5. Kontrollera att klämmorna för höjjustering av stolens hjul inte är defekta.
6. Kontrollera att sätet är intakt och att det inte finns några brott på PU-skum.
7. Kontrollera att armstöden är korrekt monterade, fungerar och att det inte finns några brott på PU-skum.
8. Kontrollera att ryggen i nätväv är korrekt monterad och intakt.
9. Kontrollera att stolens tippfunktion fungerar.
10. Kontrollera att stolens fällbara rygg fungerar.
11. Kontrollera att laddaren fungerar korrekt (se ev. bruksanvisning).
12. Kontrollera att batteriet kan laddas (se ev. bruksanvisning).



M2 Flexi-Tip

Preventative Maintenance Check:

Applies to the following Art.no: (310216, 310217)

To ensure that the aid functions safely for the user, we recommend that the following inspections be carried out.

1. Check that the frame is without breaks and the chair is intact.
2. Check that the wheels on the chair can roll freely.
3. If the chair has a directional wheel, check that it functions normally.
4. Check that the brakes on the wheels work.
5. Check that the clips for height adjustment of the chair's wheels are not defective.
6. Check that the seat is intact and there are no breaks in the PU foam.
7. Check that the armrests are correctly mounted, function, and there are no breaks in the PU foam.
8. Check that the backrest in netweave is correctly mounted and intact.
9. Check that the chair's tilt function works.
10. Check that the chair's foldable back works.
11. Check that the charger works correctly (see possibly the user manual).
12. Check that the battery can be charged (see possibly the user manual).





DK:

Dette produkt skal genbruges i henhold til nationale regler. Efter adskillelse af produktet skal du sortere komponenterne ud fra hvad de er lavet af, og genbruge dem individuelt. Kontakt venligst dit lokale genbrugssted for vejledning, hvis det er nødvendigt.

EN:

This product should be recycled following national regulation. After disassembly of the product, sort the components based on what they are made of and recycle them individually. Please contact your local recycling place for guidance if necessary.

DE:

Dieses Produkt sollte gemäß den nationalen Vorschriften recycelt werden. Sortieren Sie nach der Demontage des Produkts die Bestandteile nach Beschaffenheit und führen Sie diese einzeln der Wiederverwertung zu. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren örtlichen Recyclinghof, um sich beraten zu lassen.

SV:

Denna produkt måste återvinnas enligt nationella bestämmelser. Efter demontering av produkten, sortera komponenterna efter vad de är gjorda av och återvinn dem individuellt. Kontakta din lokala återvinningscentral för vägledning om det behövs.

NO:

Dette produktet skal resirkuleres i henhold til nasjonale forskrifter. Etter demontering av produktet, sorter komponentene basert på hva de er laget av og resirkuler dem individuelt. Ta kontakt med ditt lokale gjenvinningssted for veiledning om nødvendig.

FI:

Tämä tuote tulee kierrättää kansallisten määräysten mukaisesti. Tuotteen purkamisen jälkeen lajittele komponentit sen mukaan, mistä ne on valmistettu, ja kierrätä ne yksitellen. Ota tarvittaessa yhteyttä paikalliseen kierrätyspisteeseen saadaksesi ohjeita.

NL:

Dit product moet worden gerecycled volgens de nationale voorschriften. Sorteert na demontage van het product de onderdelen op basis van hun materiaal en recycle ze afzonderlijk. Neem indien nodig contact op met uw plaatselijke recyclingbedrijf voor advies.

IT:

Questo prodotto deve essere riciclato secondo le normative nazionali. Dopo lo smontaggio, separare i componenti in base alla loro composizione e riciclarli singolarmente. Se necessario, contattare il centro di riciclaggio locale per ricevere assistenza.



HMN since 1934

Midtager 22 - 2605 - Brøndby - Danmark

Tlf.: 0045 4396 2400 - E-mail: info@hmn.dk - Web: www.hmn.dk

HMN a/s